

Těhotenský test

s INDIKÁTOREM SPRÁVNÉHO POUŽITÍ

- Clearblue® PLUS funguje s přesností vyšší než 99 %, pokud testujete po dni očekávané menstruace
- Clearblue® PLUS lze použít již 5 dní předem

Před provedením testu si prosím pozorně přečtete tento leták.

Než začnete

Možná Vám během testu pomůže, když budete sledovat hodiny či hodinky.

1 PŘEDVEDENÍ TESTU

Jestliže provádíte test po dni očekávané menstruace, můžete jej provádět v kteroukoli denní dobu. Jestliže provádíte test před dnem očekávané menstruace, použijte první moč daného dne. Jakkmile jste připravena na testování, vyjměte testovací tyčinku z fóliového obalu a sejměte modrý kryt. Testovací tyčinku okamžitě použijte.

TESTOVÁNÍ MOČI

Test můžete provádět přímo v proudu moči nebo ve vzorku moči zachyceném do čisté, suché nádoby.



- Indikátor správného použití držte tak, aby směřoval dolů, jak je zobrazeno na obrázku, buď v proudu moči, nebo v zachyceném vzorku moči, a to po dobu celých 5 sekund.
- Indikátor správného použití ihned zružoví, čímž ukazuje, že je moč absorbována. Musíte indikátor správného použití nadále držet v moči po celých 5 sekund.



Musíte indikátor správného použití nadále držet v moči po celých 5 sekund. Jakkmile indikátor správného použití zružoví, začnete odpočítávat 5 sekund.

Proud moči NEBO Odebraný vzorek

- Nadále udržujte indikátor správného použití v takové poloze, aby směřoval dolů, nebo testovací tyčinku položte na rovnou plochu, dokud nebudete připravena odečíst výsledek a v kontrolním okénku se neobjeví modrá čárka.
- Můžete opět nasadit kryt.

Jestliže indikátor správného použití nebude úplně růžový, viz otázka 7.



POČKEJTE 3 MINUTY.

Jak test začne pracovat, uvidíte rozvíjející se modrou čárku / modré čárky.


3 INTERPRETACE VÝSLEDKU

V okénku s výsledkem si můžete přečíst výsledek.

Při odečítání výsledku musí být v kontrolním okénku modrá čárka. Tato čárka znamená, že test proběhl.

Výsledek „Jste těhotná“ se může objevit již za 1 minutu, když se testujete dne očekávané menstruace (což je den po dni očekávané menstruace, která se nedostavila). Pro potvrzení výsledku „Nejste těhotná“ byste měla počkat celé 3 minuty. Pokud provádíte test před dnem očekávané menstruace (viz otázka 10).

Jestliže se v kontrolním okénku do 10 minut neobjeví modrá čárka, test neproběhl (viz otázka 7).

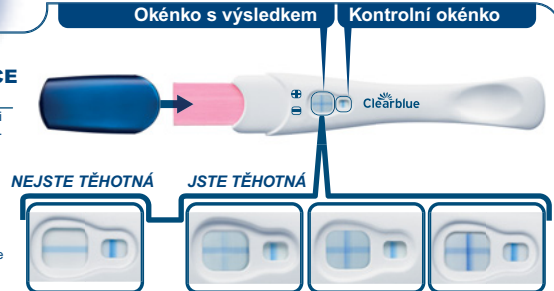

Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, viz otázka 12 v oddílu Otázky a odpovědi.

Jestliže je výsledek „Jste těhotná“, viz otázka 13 v oddílu Otázky a odpovědi.

Nezáleží na tom, jestli je jedna z čárek, které tvoří symbol „+“, světlejší nebo tmavší než druhá; výsledek je „Jste těhotná“.

DŮLEŽITÉ!

Výsledek si přečtěte během 10 minut od provedení testu. Jakékoli změny ve výsledku po této době ignorujte.

Pokud si stále nejste jista výsledkem, podrobné informace najdete v otázce 8.

Otázky a odpovědi – Přečtete si prosím níže uvedeny oddíl, který zodpovídá nejčastější dotazy.

Otázky a odpovědi

1 Jak přesný je těhotenský test Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS má při laboratorních testech přesnost vyšší než 99 %, když se použije po dni očekávané menstruace.

2 Jak funguje těhotenský test Clearblue® PLUS?

Když jste těhotná, Vaše tělo produkuje těhotenský hormon hCG (lidský choriový gonadotropin). Hladina hCG ve Vašem těle se v raných stádiích těhotenství zvyšuje. Clearblue® PLUS dokáže zjistit i malá množství tohoto hormonu ve Vaší moči (citlivost tohoto testu je 25 mIU/ml).

3 Kdy mohu provádět test pomocí těhotenského testu Clearblue® PLUS?

Clearblue® PLUS lze použít až 5 dní předem (což je 4 dny před očekávanou menstruací). Pokud provádíte test před dnem očekávané menstruace a výsledek je „Nejste těhotná“, stále ještě existuje možnost, že těhotná jste. Viz níže uvedená tabulka s výsledky klinického testování těhotenského testu Clearblue® PLUS na vzorcích z raného stádia těhotenství.

Testování v raných fázích

Počet dnů před očekávanou menstruací	% vzorků od těhotných žen s výsledkem „Jste těhotná“
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

4 Musím použít vzorek ranní moči?

Pokud provádíte test před očekávanou menstruací, doporučujeme Vám použít první ranní moč. Jinak můžete test provést kdykoliv během dne. Před testováním nepřijímejte nadměrné množství tekutin.

5 Nejsem si jistá, kdy mám opět začít menstruovat. Jak poznám, že provádím test ve správnou chvíli?

Chcete-li zjistit datum očekávané menstruace, vypočítejte obvyklou délku svého cyklu tak, že spočítáte počet dnů od prvního dne předchozí menstruace do dne před začátkem další menstruace.

- Máte-li nepravidelné cykly, měla byste počítat s nejdelším cyklem, který jste měla v posledních měsících před testováním.
- Pokud nevíte, jaké je datum očekávané menstruace, doporučujeme, abyste provedla testování nejméně 19 dnů po posledním nechráněném styku.
- Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, ale stále máte podezření na těhotenství, viz otázka 13.

6 Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?

- Před provedením testu si vždy přečtete pokyny od výrobce v příbalovém letáčku všech léků, které užíváte.
- Léky na podporu plodnosti obsahující hCG mohou vést k zavádějícím výsledkům (tyto léky se obvykle podávají injekčně a provádění testu příliš brzy po jejich podání může způsobit falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“).
- Jiné léky na podporu plodnosti (např. léky obsahující klomifen citrát), léky proti bolesti a hormonální antikoncepční prostředky (např. antikoncepční pilulky) by výsledkem ovlivnit neměly.
- Jestliže jste v nedávné době přestala brát hormonální antikoncepci nebo užíváte léky na podporu plodnosti, jako např. léky obsahující klomifen citrát, může být váš cyklus nepravidelný, a to Vás může vést k příliš časnému testování.

- Jestliže jste byla v nedávné době těhotná (i v případě, že bylo těhotenství ukončeno), může dostat falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“.
- Mimoděložní těhotenství, vaječnickové cysty, menopauza a některá velmi vzácná onemocnění mohou vést k zavádějícím výsledkům.
- Jestliže jste měla výsledek „Jste těhotná“, je možné, že později zjistíte, že těhotná nejste, a to v důsledku samovolného potratu, ke kterému může v raných stádiích dojít.

Pokud obdržíte neočekávané výsledky, měla byste je probrat se svým lékařem.

7 Provedla jsem těhotenský test, ale indikátor správného použití není úplně růžový. Co mám udělat?

Jestliže indikátor správného použití úplně nezružoví, je možné, že jste neaplikovala dostatečné množství moči. Pokud se ale do 10 minut po provedení testu objeví v kontrolním okénku modrá čárka, test proběhl. Jestliže se do 10 minut po provedení testu neobjeví v kontrolním okénku modrá čárka, viz otázka 8.

8 Provedla jsem těhotenský test, ale v kontrolním okénku se neobjevila modrá čárka. Co mám udělat?

Jestliže se do 10 minut po provedení testu neobjeví v kontrolním okénku modrá čárka, test neproběhl. Možná příčina:

- Po aplikaci moči nebyl indikátor správného použití udržován v takové poloze, aby směřoval dolů, nebo testovací tyčinka nebyla položena na rovnou plochu.
- Bylo použito příliš mnoho nebo příliš málo moči. Indikátor musíte držet v moči po dobu 5 sekund.

Měla byste testování provést znovu s novou testovací tyčinkou a pečlivě dodržovat pokyny. Vzorek moči můžete zachytit do čisté, suché nádoby a ponořit do ní jen indikátor správného použití, a to pouze na 5 sekund.

9 Co když si nejsem výsledkem jistá?

- Aby byl výsledek „Jste těhotná“, musí se do 10 minut po provedení testu objevit v kontrolním okénku modrá čárka a v okénku s výsledkem symbol „+“.
- Vzhled symbolu „+“ v okénku s výsledkem se může lišit, ale čárky, které tvoří symbol „+“, a čárka v kontrolním okénku by měly mít podobnou sířku (viz obrázky A–C).

Obrázek A

Toto znamená výsledek „Jste těhotná“. K tomuto dojde s větší pravděpodobností v případě, že provádíte test před dnem očekávané menstruace, kdy hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

Obrázek B

Toto není neobvyklé, když jste těhotná a provádíte test v den nebo okolo dne Vaší očekávané menstruace, protože hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

Obrázek C

Toto se s větší pravděpodobností objeví, když jste těhotná a provádíte test více než několik dní po dni očekávané menstruace, protože hladiny hCG jsou vyšší. Pokud si stále nejste jista výsledkem, měla byste počkat nejméně 3 dny, než provedete další test, a pečlivě dodržovat pokyny.

- Aby byl výsledek „Nejste těhotná“, musí se do 10 minut po provedení testu objevit v kontrolním okénku modrá čárka a v okénku s výsledkem symbol „-“ (minus). Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, ale stále máte podezření na těhotenství, viz otázka 13.

10 Co mohu mít vliv na přesnost výsledku?

Pokud provádíte test před dnem očekávané menstruace, bude přesnost testu Clearblue® PLUS nižší. Pokud nebudete vzorek moči testovat po stanovený čas, nemusíte obdržet spolehlivý výsledek. Pokud se však během 10 minut po provedení testu objeví v kontrolním okénku modrá čárka, můžete se na výsledek spolehnout. Pokud opakovaně obdržíte neočekávané výsledky, měla byste se poradit se svým lékařem. Viz také otázka 6.

11 Kdy mohu výsledek odečíst?

Výsledek „Jste těhotná“ se může objevit již za 1 minutu, když se testujete o dne očekávané menstruace (což je den po dni očekávané menstruace, která se nedostavila). Před odečtením výsledku se ujistěte, zda se v kontrolním okénku objevila modrá čárka. Pro potvrzení výsledku „Nejste těhotná“ nebo při provádění testu před dnem očekávané menstruace musíte vyčkat 3 minuty. Jestliže se v kontrolním okénku do 10 minut neobjeví modrá čárka, test neproběhl (viz otázka 8).

12 Jak dlouho lze výsledek odečíst?

Výsledek lze odečíst kdykoli mezi 3 a 10 minutami. Po uplynutí 10 minut je třeba jakoukoli změnu ve výsledku ignorovat.

13 Test říká „Nejste těhotná“. Co mám udělat?

Pravděpodobně nejste těhotná, nebo hladina těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna, nebo jste špatně spóbořila datum očekávané menstruace.

- Pokud jste test provedla v časně fázi, proveďte jej znovu v době očekávané menstruace.
- Pokud je menstruace opožděná, proveďte test znovu za 3 dny. Pokud test udává výsledek „Nejste těhotná“ a stále ještě nemáte menstruaci, navštivte svého lékaře.
- Test říká „Jste těhotná“. Co mám udělat? Jestliže test říká, že jste těhotná, měla byste navštívit svého lékaře, který Vám může poradit, jaké další kroky byste měla učinit.

IVD	In vitro diagnostický zdravotnický prostředek	LOT	Kód šarže	Nepoužívejte opakovaně
	Teplotní omezení 2–30 °C		Použití do data	Výrobce
Datum poslední revize testu: 02/2015				Viz návod k použití

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St. Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko.
Clearblue je ochranná známka společnosti SPD. Vyrobeno v Číně.
© 2015 SPD. Všechna práva vyhrazena.

Distribuce v ČR: Glynn Aesthetics Prague spol. s r.o., Česká republika.

Informace, všeobecné rady ohledně problematiky těhotenství a další kroky naleznete na našich webových stránkách:

www.clearblue.com

Tento prostředek je určen pro domácí testování.

Skladujte při pokojové teplotě.

Pokud byl test skladován v chladu, ponechte jej 30 minut před testováním dosáhnout pokojové teploty. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Určeno pouze pro diagnostické použití in vitro.

Zlikvidujte s normálním domovním odpadem.

Nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozený.

Nepoužívejte testovací tyčinku po uplynutí data její expirace.

