

Těhotenský test s ukazatelem týdnů

- Jestliže provádíte test po dni očekávané menstruace, můžete jej provádět v kteroukoli denní dobu, a zjistit tak, zda jste těhotná.
- Jestliže provádíte test před dnem očekávané menstruace, použijte ranní moč.
- Aby byl výsledek na ukazateli týdnů přesný, musíte použít ranní moč.
- Před provedením testu nepijte větší objem tekutin.
- **Před provedením testu si pozorně přečtěte tento příbalový leták.**

1 Proveďte test

Jakmile jste připravena na testování, vyjměte testovací tyčinku z fóliového obalu a sejměte modrý kryt. Testovací tyčinku okamžitě použijte.

BUĎ
Testování v proudu moči

- Absorpční tyčinku v poloze směrem dolů přidrže v proudu moči **po dobu pouhých 5 sekund**.
- Dávejte pozor, aby se nenamočila zbylá část testovací tyčinky.
- Na testovací tyčinku můžete opět nasadit kryt a položit ji na rovnou plochu.



NEBO


Vzorek moči odeberte do čisté a suché nádoby

- Absorpční tyčinku v poloze směrem dolů přidrže ve vzorku moči, jak je znázorněno na obrázku, **po dobu pouhých 20 sekund**.
- Na testovací tyčinku můžete opět nasadit kryt a položit ji na rovnou plochu.



2 Vyčkejte...

- Probíhající test bude signalizován blikajícím symbolem přesýpacích hodin.
- Když symbol přesýpacích hodin přestane blikat, objeví se výsledek. Pokud se po použití testu neobjeví symbol přesýpacích hodin, viz „Chyby testování“.

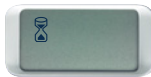

Během testování **nikdy** nedrže testovací tyčinku s absorpční tyčinkou směrem nahoru.

3 Podívejte se na výsledek

Ukazatel týdnů poskytuje odhad, kdy došlo k početí. Tato informace se zobrazí na displeji spolu s výsledkem „Jste těhotná“.

- Na displeji se během **3 minut** zobrazí výsledek.
- Výsledek „Jste těhotná“ se na displeji může zobrazit **dříve** než výsledek na ukazateli týdnů. **Dále čekejte**, dokud nepřestane blikat symbol přesýpacích hodin a nezobrazí se výsledek na ukazateli týdnů. Toto může trvat až 3 minuty.
- Někdy se výsledky mohou zobrazit už za 1 minutu.
- Výsledek zůstane na displeji po dobu přibližně 24 hodin.
- Pokud je výsledek „Jste těhotná“, měla byste navštívit svého lékaře, který Vám může poradit, jaké další kroky byste měla učinit. Váš lékař vypočítá, v jakém stádiu těhotenství jste, na základě prvního dne poslední menstruace.
- K početí dochází asi 2 týdny před další očekávanou menstruací. Ukazatel týdnů poskytuje odhad, kdy došlo k početí.

Ukazatel týdnů má při určení doby početí přesnost 93 % (viz otázka 3). Přesnost výsledku „Jste těhotná“ / „Nejste těhotná“ je vyšší než 99 %, pokud test provádíte nejdříve v den očekávané menstruace.

Jak interpretovat výsledky

Výsledek	Doba od početí	Jak lékař určí datum Vašeho otěhotnění (na základě 28denního cyklu*)
	Váš výsledek je „Nejste těhotná“ , viz otázka 10.	-
	Váš výsledek je „Jste těhotná“ a k početí došlo před přibližně 1-2 týdny.	3-4 týdnů
	Váš výsledek je „Jste těhotná“ a k početí došlo před přibližně 2 až 3 týdny.	4-5 týdnů
	Váš výsledek je „Jste těhotná“ a k početí došlo před více než 3 týdny.	5 a více týdnů

*Váš lékař vypočítá, v jakém stádiu těhotenství jste na základě prvního dne poslední menstruace.

Chyby testování

Pokud jste použila testovací tyčinku a na displeji se nezobrazuje žádný z výsledků uvedených na této stránce, přečtěte si část „Chyby testování“.

Otázky a odpovědi

- Jak funguje test Clearblue s ukazatelem týdnů?**
Když jste těhotná, Vaše tělo produkuje těhotenský hormon hCG (lidský choriový gonadotropin). Hladina hCG ve Vašem těle se v raných stádiích těhotenství zvyšuje. Tento test dokáže zjistit i malá množství tohoto hormonu v moči (citlivost tohoto testu je 25 mIU/ml). Ukazatel týdnů poskytuje odhad doby početí na základě hladiny hCG ve Vaší moči.
- Jak přesný je test Clearblue s ukazatelem týdnů při určování těhotenství?**
V laboratorních testech vykazuje těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů při určování, zda jste, nebo nejste těhotná, více než 99% přesnost, pokud jej použijete po dni očekávané menstruace. Pokud provádíte test přede dnem očekávané menstruace a výsledek je „Nejste těhotná“, stále ještě existuje možnost, že těhotná jste. Viz otázka 4.
- Jak přesný je ukazatel týdnů?**
Ukazatel týdnů má při určení doby početí přesnost 93 %. Odhad je založen na úrovni hladiny hCG ve Vaší moči. Hladina hCG se u jednotlivých žen liší, je tedy možné, že ukazatel týdnů může příležitostně ukázat zavádějící výsledky. Ukazatel týdnů prokázal 97% přesnost na základě shody s pozdějším ultrazvukovým vyšetřením pro stanovení doby početí (11-13 týdnů). Založeno na studii výsledků u 187 žen (1-2, 2-3, 3 a více týdnů od početí) v porovnání s datováním těhotenství pomocí ultrazvukového vyšetření. Pokud test provádíte více než 6 týdnů od početí, může ukazatel týdnů zobrazovat neočekávané výsledky. Důvodem je, že hladina hormonu hCG v moči je příliš vysoká na to, aby test mohl poskytnout přesný odhad doby od početí.
- Kdy mohu použít test Clearblue s ukazatelem týdnů?**
Test lze provádět již 5 dní před vynechanou menstruací (což je 4 dny před očekávanou menstruací). Pokud provádíte test přede dnem očekávané menstruace a výsledek je „Nejste těhotná“, stále ještě existuje možnost, že těhotná jste. Viz níže uvedená tabulka s výsledky klinického testování těhotenského testu na vzorcích z raného stádia těhotenství.

Časné testování				
Počet dnů před očekávanou menstruací	-1	-2	-3	-4
% vzorků od těhotných žen s výsledkem „Jste těhotná“	98 %	97 %	90 %	65 %

Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, ale stále máte podezření na těhotenství, viz otázka 10.

Chcete-li zjistit datum očekávané menstruace, vypočtete obvyklou délku svého cyklu tak, že spočítáte počet dnů od prvního dne předchozí menstruace do dne před začátkem další menstruace.

Máte-li nepravidelné cykly, měla byste počítat s nejdělním cyklem, který jste měla v posledních měsících před testováním.

- Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?**
 - Před provedením testu si vždy přečtěte pokyny od výrobce v příbalových letáčích všech léků, které užíváte.
 - Léky pro léčbu neplodnosti obsahující hCG mohou vést k zavádějícím výsledkům (tyto léky se obvykle podávají ve formě injekcí a provedení testu příliš brzy po jejich podání může způsobit falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“).
 - Jiné léky pro léčbu neplodnosti (např. léky obsahující klomifen citrát), léky proti bolesti a hormonální antikoncepční prostředky (např. antikoncepční pilulky) by výsledek ovlivnit neměly.
 - Pokud jste v nedávné době přestala brát hormonální antikoncepci nebo užíváte léky pro léčbu neplodnosti, jako např. léky obsahující klomifen citrát, může být váš cyklus nepravidelný, a to Váš může vést k příliš časnému testování.
 - Jestliže jste byla v nedávné době těhotná (i v případě nedonošení), můžete obdržet falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“.
 - Pokud jste v menopauze nebo se jí blížíte, můžete obdržet falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“, ačkoli těhotná nejste.
 - Mimosděložní těhotenství a vaječnickové cysty mohou vést k zavádějícím výsledkům.
 - Vícečetná a mimosděložní těhotenství mohou vést k zavádějícím výsledkům ukazatele týdnů. Pokud obdržíte neočekávané výsledky, měla byste je probrat se svým lékařem.
- Test říká „Jste těhotná“. Co mám udělat?**
Pokud je výsledek „Jste těhotná“, měla byste navštívit svého lékaře, který Vám může poradit, jaké další kroky byste měla učinit. Ukazatel týdnů poskytuje pouze odhad doby početí. Váš lékař vypočítá, v jakém stádiu těhotenství jste, na základě prvního dne poslední menstruace. K početí dochází asi 2 týdny před další očekávanou menstruací.
- Test říká, že jsem těhotná, nemyslím si ale, že došlo k početí v období, které uvádí ukazatel týdnů. Je to možné?**
Přesnost ukazatele týdnů je 93 %, pokud testování provádíte s první ranní močí. Některé léky nebo zdravotní stav mohou výsledek ovlivnit. Viz otázka 5.
- Měla jsem výsledek „Jste těhotná“, ale když jsem test zopakovala, byl výsledek „Nejste těhotná“ nebo jsem začala menstruat. Co to znamená?**
Test detekuje těhotenský hormon po dni očekávané menstruace s přesností vyšší než 99 %, lze tedy obdržet výsledek „Jste těhotná“ a později zjistit, že nejste těhotná (tj. později obdržíte výsledek „Nejste těhotná“ nebo začnete menstruat).

Může k tomu dojít v důsledku samovolných potratů v raných stádiích těhotenství, kterým se říká „časná těhotenská ztráta“ a které bohužel nejsou neobvyklé, protože asi každé čtvrté těhotenství je ukončeno jako časná těhotenská ztráta. Pokud obdržíte neočekávané výsledky, požádejte svého lékaře o radu.

- Předchozí výsledek mého testu byl „Jste těhotná“. Provedla jsem test znovu a podle ukazatele týdnů se počet týdnů od početí snížil. Co mám udělat?**
Pokud jste test prováděla podle pokynů, v obou případech použila první ranní moč a ukazatel týdnů zobrazil neočekávané výsledky, měla byste navštívit svého lékaře.

- Test říká „Nejste těhotná“. Co mám udělat?**
Pravděpodobně nejste těhotná, nebo hladina těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna, nebo jste špatně spočítala datum očekávané menstruace.

- Pokud jste test provedla v časně fázi, proveďte jej znovu v době očekávané menstruace.
- Pokud je menstruace opožděna, proveďte test znovu za 3 dny. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná“ a stále ještě nemáte menstruaci, navštivte svého lékaře.

Chyby testování

Symbol knížečky – během testování došlo k chybě. Důvodem může být:

- Po aplikaci moči nebyla absorpční tyčinka udržována v takové poloze, aby směřovala dolů, nebo test nebyl uložen do vodorovné polohy.
- Bylo aplikováno příliš mnoho nebo příliš málo moči. Měla byste testování provést znovu s novým testem a pečlivě dodržovat pokyny.

Prázdný displej

Test nefungoval podle očekávání. Příčinou může být, že jste nepostupovala podle návodu k použití. Bude nutné, abyste provedla další test. Dodržujte prosím pečlivě návod k použití.

Likvidace testu

Prosím zlikvidujte se svým normálním domovním odpadem. Prostředek obsahuje baterie. **Upozornění:** Prostředek nerozebírejte, baterie znovu nenabíjejte ani je nevhazujte do ohně.

Toto digitální zařízení pro diagnostické použití *in vitro* (IVD) splňuje požadavky na emise a odolnost podle normy EN 61326-2-6:2006. Protiopatření týkající se elektromagnetické kompatibility použita v tomto elektronickém přístroji poskytnou přiměřenou ochranu proti účinkům elektromagnetického rušení, které se pravděpodobně vyskytují v domácím prostředí. Následující preventivní varování platí pro zařízení vyhovující normě EN 61326-2-6:2006.

a) Použití tohoto přístroje v suchém prostředí, zejména pokud jsou přítomny syntetické materiály (syntetické oděvy, koberce apod.), může vyvolávat škodlivé statické výboje, jež mohou způsobit nesprávné výsledky.

b) Nepoužívejte tento přístroj v těsné blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření (např. mobilních telefonů), protože by to mohlo narušit správnou funkci.

Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické použití *in vitro*. Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívejte opakovaně. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte při teplotách mezi 2-30 °C. Pokud byl test skladován v chladu, ponechte jej 30 minut před testováním dosáhnout pokojové teploty.

Prostředek nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozený. Nepoužívejte po datu spotřeby. Tento výrobek obsahuje baterie. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. **Pozor:** Prostředek obsahuje baterie. Prostředek nerozebírejte, baterie znovu nenabíjejte ani je nevhazujte do ohně. Obsahuje malé části. Nejezte žádnou součást tohoto prostředku. Dojde-li k náhodnému požití, vyhledejte lékařskou pomoc.

	Výrobce		Nepoužívejte opakovaně
	Kód šarže		Diagnostický zdravotnický prostředek pro použití <i>in vitro</i>
	Použit do data		Teplotní omezení 2-30 °C

www.clearblue.com

✉ Distribuce v ČR: Glynn Brothers Chemicals Prague spol. s r.o., Česká republika.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko. Clearblue je ochranná známka společnosti SPD. © 2019 SPD. Všechna práva vyhrazena.