

Těhotenský test Rychlá detekce

- Přesnost vyšší než 99 % po dni očekávané menstruace.
- Před provedením testu si pozorně přečtěte tento příbalový leták.

1 Než začnete

Možná Vám během testu pomůže, když budete sledovat hodiny či hodinky. Ode dne očekávané menstruace můžete provádět test v kterékoli denní dobu.

2 Provedte test

Jakmile jste připravena k testování, odstraňte fóliový obal a sejměte kryt. Testovací tyčinku okamžitě použijte. Test můžete provádět přímo v proudu moči nebo ve vzorku moči zachyceném do čisté, suché nádoby.

- Indikátor správného použití držte tak, aby směřoval dolů, jak je zobrazeno na obrázku, buď v proudu moči, nebo v odebraném vzorku moči, a to po dobu celých 5 sekund.
- Indikátor správného použití ihned zrůžoví, čímž ukazuje, že je moč absorbována. Indikátor správného použití musíte držet v moči po celých 5 sekund.



Indikátor správného použití musíte držet v moči po celých 5 sekund.

Jakmile indikátor správného použití zrůžoví, začněte odpočítávat 5 sekund.

- Nadále udržujte indikátor správného použití v takové poloze, aby směřoval dolů, nebo testovací tyčinku položte na rovnou plochu, dokud nebudete připravena odečíst výsledek a v kontrolním okénku se neobjeví modrá čárka.
- Můžete opět nasadit kryt.
- Jestliže indikátor správného použití nebude úplně růžový, viz otázka 5.



POČKEJTE 3 MINUTY.
Jak test začne pracovat, uvidíte rozvíjející se modré čárky.


3 Podívejte se na výsledek

V okénku s výsledkem si můžete přečíst výsledek.

Při odečítání výsledku musí být v kontrolním okénku modrá čárka. Tato čárka znamená, že test proběhl.

Výsledek „Jste těhotná“ se může objevit již po 1 minutě, když se testuje ode dne vynechané menstruace (což je den po dni očekávané menstruace).

Pro potvrzení výsledku „Nejste těhotná“ byste měla počkat celé 3 minuty (viz otázka 8). Jestliže v kontrolním okénku nevidíte modrou čárku, test neproběhl (viz otázka 6).

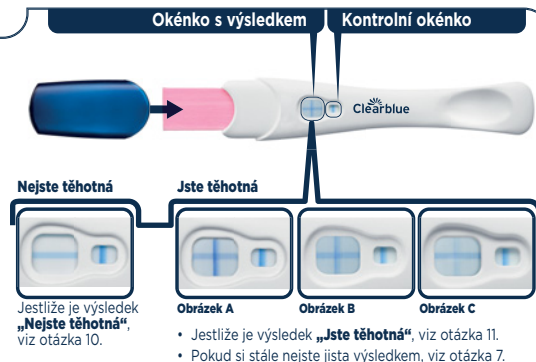

Nejste těhotná
Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, viz otázka 10.

Jste těhotná

- Jestliže je výsledek „Jste těhotná“, viz otázka 11.
- Pokud si stále nejste jista výsledkem, viz otázka 7.

Nezáleží na tom, jestli je jedna z čárek, které tvoří symbol „+“, světlejší nebo tmavší než druhá. Výsledek je „Jste těhotná“.

DŮLEŽITÉ! Výsledek si přečtěte během 10 minut od provedení testu. Jakékoli změny ve výsledku po této době ignorujte.

Otázky a odpovědi

1 Jak přesný je těhotenský test Clearblue?

Test Clearblue má při laboratorních testech přesnost vyšší než 99 %, když se použije po dni očekávané menstruace.

2 Jak funguje těhotenský test Clearblue?

Když jste těhotná, Vaše tělo produkuje těhotenský hormon hCG (lidský choriový gonadotropin). Hladina hCG ve Vašem těle se v raných stádiích těhotenství zvyšuje. Test Clearblue Rychlá detekce dokáže zjistit i malá množství tohoto hormonu v moči (citlivost tohoto testu je 25 mIU/ml).

3 Nejsem si jistá, kdy mám opět začít menstruovat. Jak poznám, že provádím test ve správnou chvíli?

Chcete-li zjistit datum očekávané menstruace, vypočtete obvyklou délku svého cyklu tak, že spočítáte počet dnů od prvního dne předchozí menstruace do dne před začátkem další menstruace.

- Máte-li nepravidelné cykly, měla byste počítat s nejdelším cyklem, který jste měla v posledních měsících před testováním.

Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, ale stále máte podezření na těhotenství, viz otázka 10.

4 Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?

- Před provedením testu si vždy přečtěte pokyny od výrobce v příbalových letáčích všech léků, které užíváte.
 - Léky pro léčbu neplodnosti obsahující hCG mohou vést k zavádějícím výsledkům (tyto léky se obvykle podávají ve formě injekcí a provedení testu příliš brzy po jejich podání může způsobit falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“).
 - Jiné léky pro léčbu neplodnosti (např. léky obsahující klomifen citrát), léky proti bolesti a hormonální antikoncepční prostředky (např. antikoncepční pilulky) by výsledkem ovlivnit neměly.
 - Pokud jste v nedávné době přestala brát hormonální antikoncepci nebo užíváte léky pro léčbu neplodnosti, jako např. léky obsahující klomifen citrát, může být váš cyklus nepravidelný, a to u Vás může vést k příliš časnému testování.
 - Jestliže jste byla v nedávné době těhotná (i v případě neodehození), můžete dostat falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“.
 - Mimoděložní těhotenství, vaječnickové cysty, menopauza a některá velmi vzácná onemocnění mohou vést k zavádějícím výsledkům.
 - Jestliže jste obdržela výsledek „Jste těhotná“, je možné, že později zjistíte, že těhotná nejste, a to v důsledku samovolného potratu, ke kterému může v raných stádiích dojít.
- Pokud obdržíte neočekávané výsledky, měla byste je probrat se svým lékařem.

5 Provedla jsem těhotenský test, ale indikátor správného použití není úplně růžový. Co mám udělat?

Jestliže indikátor správného použití úplně nezrůžoví, je možné, že jste neaplikovala dostatečné množství moči. Pokud se ale do 10 minut po provedení testu objeví v kontrolním okénku modrá čárka, test proběhl. Jestliže se do 10 minut po provedení testu neobjeví v kontrolním okénku modrá čárka, viz otázka 6.

6 Provedla jsem těhotenský test, ale v kontrolním okénku se neobjevila modrá čárka. Co mám udělat?

Jestliže se do 10 minut po provedení testu neobjeví v kontrolním okénku modrá čárka, test neproběhl. Možná příčina:

- Po aplikaci moči nebyl indikátor správného použití udržován v takové poloze, aby směřoval dolů, nebo testovací tyčinka nebyla položena na rovnou plochu.
- Bylo použito příliš mnoho nebo příliš málo moči. Indikátor musíte držet v moči po dobu 5 sekund.

Měla byste testování provést znovu s novou testovací tyčinkou a pečlivě dodržovat pokyny. Vzorek moči můžete odebrat do čisté a suché nádoby a ponořit do ní jen indikátor správného použití, a to pouze na 5 sekund.

7 Co když si nejsem výsledkem jistá?

Aby byl výsledek „Jste těhotná“, musí se do 10 minut po provedení testu objevit v kontrolním okénku modrá čárka a v okénku s výsledkem symbol „+“.

Vzhled symbolu „+“ v okénku s výsledkem se může lišit, ale čárky, které tvoří symbol „+“, která v kontrolním okénku by měly mít podobnou šířku (viz obrázky A-C).

Obrázek A

Toto se s větší pravděpodobností objeví, když jste těhotná a provádíte test více než několik dnů po vynechané menstruaci, protože hladiny hCG jsou vyšší.

Obrázek B

Toto není neobvyklé, když jste těhotná a provádíte test v den nebo okolo dne Vaší vynechané menstruace, protože hladiny hCG jsou ještě relativně nízké.

Obrázek C

I když je zobrazení bledé, stále ještě to znamená „Jste těhotná“. Pokud si stále nejste jista výsledkem, měla byste počkat nejméně 3 dny, než provedete další test, a pečlivě dodržovat pokyny.

- Aby byl výsledek „Nejste těhotná“, musí se do 10 minut po provedení testu objevit v kontrolním okénku modrá čárka a v okénku s výsledkem symbol „-“ (minus). Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, ale stále máte podezření na těhotenství, viz otázka 10.

8 Kdy mohu výsledek odečíst?

Výsledek „Jste těhotná“ se může objevit již za 1 minutu, když se testuje ode dne vynechané menstruace (což je den po dni očekávané menstruace). Před odečtením výsledku se ujistěte, zda se v kontrolním okénku objevila modrá čárka. Pro potvrzení výsledku „Nejste těhotná“ musíte počkat 3 minuty. Jestliže se v kontrolním okénku do 10 minut neobjeví modrá čárka, test neproběhl (viz otázka 6).

9 Jak dlouho lze výsledek odečíst?

Výsledek lze odečíst kdykoli mezi 3 a 10 minutami. Po uplynutí 10 minut je třeba jakoukoli změnu ve výsledku ignorovat.

10 Test říká „Nejste těhotná“. Co mám udělat?

Pravděpodobně nejste těhotná, nebo hladina těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna, nebo jste špatně spočítala datum očekávané menstruace.

- Pokud jste test provedla v Časné fázi, proveďte jej znovu v době očekávané menstruace.
- Pokud je menstruace opožděna, proveďte test znovu za 3 dny. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná“ a stále ještě nemáte menstruaci, navštivte svého lékaře.

11 Test říká „Jste těhotná“. Co mám udělat?

Jestliže test říká, že jste těhotná, měla byste navštívit svého lékaře, který Vám může poradit, jaké další kroky byste měla učinit.

Informace, všeobecné rady ohledně problematiky těhotenství a další kroky naleznete na našich webových stránkách: www.clearblue.com

Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické použití *in vitro*. Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívejte opakovaně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách mezi 2-30 °C. Pokud byl test skladován v chladu, ponechte jej 30 minut před testováním dosáhnout pokojové teploty. Prostředek nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozený. Nepoužívejte po datu spotřeby. Zlikvidujte s normálním domovním odpadem. Prostředek nerozebírejte. Obsahuje malé části. Nejezte žádnou součást tohoto prostředku. Dojde-li k náhodnému požití, vyhledejte lékařskou pomoc.

	Výrobce		Nepoužívejte opakovaně
	Kód šarže		Diagnostický zdravotnický prostředek pro použití <i>in vitro</i>
	Použití do data		Teplotní omezení 2-30 °C

www.clearblue.com

Distribuce v ČR: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betání 1092/19, 148 00 Praha 4, Česká republika.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Zeneva, Švýcarsko
Clearblue je ochranná známka společnosti SPD.
© 2020 SPD. Všechna práva vyhrazena.