Clearblue

Ultra časný
Těhotenský test

ČEŠTINA



Pro samotestování. Před provedením testu si pozorně přečtěte tento návod.

Tento produkt je neautomatizovaný domácí prostředek pro samotestování ke kvalitativní detekci lidského choriového gonadotropinu (hCG) v ženské moči pro zjištění těhotenství. Určeno k použití již 6 dnů před vynechanou menstruací (5 dní před dnem očekávané menstruace).

Varování a preventivní opatření
Návod pro prostředek s vytištěným označením „CB14005" na obalu. Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické použití in vitro. Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívejte opakovaně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách mezi 2–30 °C. Pokud byl test skladován v chladničce, před použitím jej vyjměte a počkejte minimálně 30 minut, dokud nedosáhne pokojové teploty. Nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozený. Nepoužívejte po datu spotřeby. Po otevření fólie prostředek ihned použijte. Zlikvidujte s normálním domovním odpadem. Obsahuje malé části. Žádná část tohoto prostředku není vhodná ke konzumaci. Dojde-li k náhodnému požití, vyhledejte lékařskou pomoc. Jakékoli zranění způsobené použitím tohoto výrobku oznamte společnosti Clearblue a kompetentnímu orgánu členského státu.

Testujte již 6 dní před vynechanou menstruací*

Pokud provádíte časné testování, použijte první ranní moč
Jinak testujte kdykoli

Před provedením testu nepijte větší objem tekutin


Výsledek zjistíte do 10 minut

1 Proveďte test

Potřebné materiály, které nejsou součástí balení: Čistá, suchá nádobka a stopky. Test vyjměte z fólie, sejměte kryt a ihned použijte.



nebo

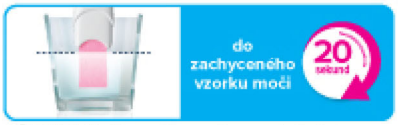

DŮLEŽITÉ: špičku zcela ponořte, viz obrázek

Umístěte špičku měnicí barvu:

DŮLEŽITÉ: špička měnicí barvu ihned zrůžoví, což znamená, že je moč absorbována. Jakmile špička měnicí barvu po použití zrůžoví, začněte odpočítávat. Znovu nasaďte kryt a položte testovací tyčinku na rovnou plochu. Jestliže špička nebude úplně růžová, viz část „Chyby testu".

2 Počkejte

3 minuty

Čárka v kontrolním okénku se může objevit rychle, ale před interpretací výsledku musíte **POČKAT CELÉ 3 MINUTY.**

Jestliže se neobjeví modré čárky, viz část „Chyby testu".

3 Výsledky

Jste těhotná – jestliže je výsledek „Jste těhotná", navštivte svého lékaře (viz otázka 1)



Nejste těhotná (viz otázka 2)



Pokud si nejste jista výsledkem, viz otázka 6.

JESTLIŽE UVIDÍTE DVĚ ČÁRKY, JSTE TĚHOTNÁ. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JSOU ČÁRKY BLEDÉ NEBO TMAVÉ.

Aby byl váš výsledek platný, musí být v kontrolním okénku modrá čárka. Pokud tomu tak není, viz část „Chyby testu".

DŮLEŽITÉ! Výsledek si přečtěte během **10 minut** od provedení testu. Jakékoli změny po uplynutí této doby jsou již irelevantní.

? Otázky a odpovědi

1. **Můj výsledek je „Jste těhotná". Co mám udělat?** Navštivte svého lékaře, který vám může poradit další kroky. Může se stát, že budete mít pozitivní výsledek, ale později zjistíte, že už nejste těhotná (viz otázka 7).
2. **Můj výsledek je „Nejste těhotná". Co to znamená?** Nemusíte být těhotná nebo hladina těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna. Za tři dny proveďte test znovu. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná" a vaše menstruace se opozdila, navštivte svého lékaře.
3. **Jak brzy mohu test provést?** Tento test lze použít již 6 dní před vynechanou menstruací (5 dní před očekávanou menstruací).* Protože hladiny hormonů se u jednotlivých žen liší a v rané fázi těhotenství mohou být velmi nízké. Můžete být těhotná, a přesto mít negativní výsledek. Níže uvedená tabulka ukazuje procento těhotenství, která byla zjištěna při laboratorním testování se vzorky moči z raného stádia těhotenství:

Dny před vynechanou menstruací	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Zjištěná těhotenství	>99 %	>99 %	>99 %	>99 %	96 %	79 %

4. **Jak tento test funguje?** Test po aplikaci vzorku zjišťuje přítomnost hormonu hCG v moči. Vizuální výsledky ukazují, zda byl hormon hCG detekován s více než 99% přesností ode dne očekávané menstruace.
5. **Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?** Před testováním si vždy přečtěte pokyny výrobce v příbalovém letáku ke všem lékům, které užíváte. Léky obsahující hCG a některé vzácné zdravotní stavy mohou být příčinou falešně pozitivních výsledků. Mimoděložní nebo nedávné těhotenství, i v případě nedonošení, mohou způsobit zavádějící výsledky. Pokud jste v menopauze nebo se jí blížíte, můžete obdržet falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná", ačkoli těhotná nejste.
Test by **NEMĚL** být ovlivněn hormonální léčbou obsahující klomifen citrát, běžnými léky proti bolesti, alkoholem, antibiotiky ani antikoncepčními pilulkami. Pokud jsou výsledky testu neočekávané, měla byste je probrat se svým lékařem.
6. **Co když si nejsem výsledkem jistá?** Jestliže uvidíte dvě modré čárky do 10 minut od provedení testu, jste těhotná, nezáleží na tom, jak jsou čárky bledé, nebo tmavé.

Výsledky „Jste těhotná"

Obrázek A: K tomuto dojde s větší pravděpodobností v případě, že provádíte test před očekávanou menstruací, kdy hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

Obrázek B: Toto můžete vidět, jestliže provádíte test okolo dne očekávané menstruace, protože hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

Obrázek C: Toto můžete vidět, jestliže provádíte test více než několik dnů po vynechané menstruaci, protože hladiny hCG jsou vyšší.

Pokud si stále nejste jistá výsledkem, měla byste počkat nejméně 3 dny, než provedete další test, a pečlivě dodržovat pokyny.

7. **Výsledek předchozího testu byl „Jste těhotná", ale když jsem test zopakovala, byl výsledek negativní nebo jsem začala menstruovat. Co to znamená?** Je možné mít pozitivní výsledek a později zjistit, že už nejste těhotná. Příčinou může být časná těhotenská ztráta, která není neobvyklá a postihuje přibližně 1 ze 4 těhotenství. Většina žen může mít později zdravé těhotenství.
8. **Je něco, co bych měla udělat, jestliže plánuji otěhotnět?** Než se pokusíte otěhotnět, je dobré se poradit se svým lékařem. Mnoho lékařů radí, že užívání kyseliny listové nebo prenatálních vitaminových doplňků, vyhýbání se alkoholu, ukončení kouření a snaha o udržení zdravé hmotnosti mohou být velmi prospěšné. Můžete také zvážit použití ovulačního testu ke zjištění vašich nejplodnějších dnů. Společnost Clearblue nabízí sortiment výrobků, které vám pomohou maximalizovat vaše šance na početí.

! Chyby testu

Špička měnicí barvu nezrůžoví úplně.
Je možné, že jste neaplikovala dostatečné množství moči. Ale jestliže se do 10 minut po provedení testu objeví kontrolní čárka, můžete si být jista, že test fungoval.

Do 10 minut po provedení testu se v kontrolním okénku modrá čárka neobjeví.
Test neproběhl úspěšně, pravděpodobně proto, že bylo použito příliš mnoho nebo příliš málo moči. Proveďte testování znovu s novým testem a pečlivě dodržujte pokyny.



www.clearblue.com

Funkční charakteristiky

Klinická funkce:
Testování klinické funkce prokázalo, že při zjišťování těhotenského stavu ode dne očekávané menstruace má prostředek větší než 99% přesnost.

- Prostředek měl v rukou laických uživatelek přesnost >99 % v porovnání s jejich těhotenským stavem (testovalo 911 žen).
- Ve studii, která testovala 300 vzorků, měl prostředek ode dne očekávané menstruace přesnost >99 %.
- Testování klinické specifičnosti s pre-, peri- a postmenopauzálními vzorky (1 051 vzorků) potvrdilo ≥99% specifičnost.

Analytická funkce:
Analytická specifičnost byla stanovena testováním prostředku pomocí potenciálně interferujících nebo křížově reagujících látek. Výsledky potvrdily, že jejich vysoké koncentrace neovlivňují výkon prostředku. Výkon není ovlivňován ani vysokými hladinami fragmentované beta podjednotky hCG, velmi vysokými hladinami intaktního hCG, rozsahem specifických hmotností nebo pH moči. Studie přesnosti prokázala, že analytická citlivost prostředku je 10 mIU/ml.

IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek pro použití in vitro	LOT	Kód šarže
	Výrobce		Použít do data
2	Nepoužívejte opakovaně		Teplotní omezení 2–30 °C
EC REP	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství		

Literatura
1. Perrier d'Hauterive S, *et al.* Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661–669.
*79 % výsledků „Jste těhotná" může být zjištěno 6 dní před vynechanou menstruací (5 dní před očekávanou menstruací).

Máte-li dotazy týkající se výrobku, kontaktujte zákaznickou podporu na níže uvedené adrese:
Distribuce v CZ: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betání 1092/19, 148 00 Praha 4, Česká republika.
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko.

Clearblue je ochranná známka společnosti SPD.
© 2025 SPD. Všechna práva vyhrazena.

2300700.00 03-2025

CE 0123