Clearblue

Těhotenský test s ukazatelem týdnů



ČEŠTINA

Určeno k samotestování. Před provedením testu si pozorně přečtěte tento návod.

Tento produkt je automatizovaný domácí prostředek pro samotestování k semikvantitativní detekci lidského choriového gonadotropinu (hCG) v ženské moči pro zjištění těhotenství. V případě pozitivního výsledku produkt navíc předpovídá počet týdnů od početí a kategorizuje je následovně: 1–2, 2–3 nebo 3+ týdny od početí. Určeno k použití již 5 dní před vynechanou menstruací (4 dny před dnem očekávané menstruace).

Varování a preventivní opatření
Návod pro prostředek s vytištěným označením „CB9A002C" na obalu. Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické použití in vitro. Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívejte opakovaně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách mezi 2–30 °C. Pokud byl test skladován v chladničce, před použitím jej vyjměte a počkejte minimálně 30 minut, dokud nedosáhne pokojové teploty. Nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozený. Po otevření fólie prostředek ihned použijte. Nepoužívejte po datu spotřeby. Tento výrobek obsahuje baterie. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obsahuje malé části. Žádná část tohoto prostředku není vhodná ke konzumaci. Dojde-li k náhodnému požití, vyhledejte lékařskou pomoc. Jakékoli zranění způsobené použitím tohoto výrobku oznamte společnosti Clearblue a příslušnému orgánu členského státu.

Přesnost vyšší než 99 % při zjišťování těhotenství ode dne očekávané menstruace

Pokud provádíte časné testování, použijte první ranní moč
Jinak testujte kdykoli

Před provedením testu **nepijte větší objem tekutin**

Nikdy nedržte test tyčinkou nahoru

1 Proveďte test

Potřebné materiály, které nejsou součástí balení: Čistá, suchá nádobka (v případě ponoření testovací tyčinky) a stopky.
Test vyjměte z fólie, sejměte kryt a ihned použijte. Testujte **buď**:



nebo



Znovu nasaďte kryt a položte testovací tyčinku na rovnou plochu.

2 Počkejte




Blikající symbol přesýpacích hodin signalizuje, že test probíhá, a výsledek se zobrazí za 1–3 minuty.


Pokud se symbol přesýpacích hodin nezobrazuje, viz „Chyby testu".

3 Podívejte se na výsledek

Výsledek „Jste těhotná" se na displeji může zobrazit dříve než výsledek na ukazateli týdnů.

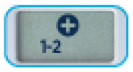

K početí došlo asi před 1–2 týdny.
Lékař vám tuto dobu určí jako 3–4 týdny těhotenství.

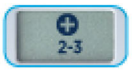

K početí došlo asi před 2–3 týdny.
Lékař vám tuto dobu určí jako 4–5 týdnů těhotenství.



K početí došlo před více než 3 týdny.
Lékař vám tuto dobu určí jako 5+ týdnů těhotenství.



Jestliže je výsledek **„Jste těhotná"**, viz otázka 2.

Ukazatel týdnů má při určení doby početí přesnost 93 % (viz otázka 3). Váš lékař dobu těhotenství určí pomocí jiné metody na základě prvního dne poslední menstruace.

Jestliže je výsledek **„Nejste těhotná"**, viz otázka 4.

? Otázky a odpovědi

1. **Kdy mám testovat?** Aby byl výsledek na ukazateli týdnů přesný, a při časném testování, použijte první ranní moč.
2. **Můj výsledek je „Jste těhotná". Co mám udělat?** Navštivte svého lékaře, který vám může poradit další kroky. **Test Clearblue s ukazatelem týdnů má přesnost vyšší než 99 % při zjišťování těhotenství ode dne, kdy očekáváte menstruaci.** Výsledek „Jste těhotná" zůstane na displeji po dobu přibližně 24 hodin.
3. **Jak přesný je ukazatel týdnů?** Přesnost ukazatele týdnů při zjišťování těhotenství je 93 %, pokud testování provádíte s první ranní močí. K početí dochází asi 2 týdny před další očekávanou menstruací. Váš lékař dobu těhotenství určí pomocí jiné metody na základě prvního dne poslední menstruace (na základě 28denního cyklu).
4. **Můj výsledek je „Nejste těhotná". Co to znamená?** Pravděpodobně nejste těhotná nebo hladina těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna. Pokud si přesto myslíte, že byste mohla být těhotná, udělejte si za tři dny další test. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná" a vaše menstruace se opozdila, navštivte svého lékaře.
5. **Jak brzy mohu test provést?** Tento test lze použít již 5 dnů před vynechanou menstruací (4 dny před očekávanou menstruací).* Pravděpodobnost, že test bude pozitivní, se každým dnem zvyšuje. Hladiny hormonů se u jednotlivých žen liší a v rané fázi těhotenství mohou být velmi nízké, můžete být těhotná, a přesto mít negativní výsledek. Níže uvedená tabulka ukazuje procento těhotenství, která byla zjištěna při laboratorním testování se vzorky moči z raného stádia těhotenství:

Dny před vynechanou menstruací	−1	−2	−3	−4	−5
Zjištěná těhotenství	>99 %	99 %	99 %	97 %	80 %

6. **Jak funguje test Clearblue s ukazatelem týdnů?** Semikvantitativně detekuje těhotenský hormon hCG v ženské moči a ukazuje, kolik týdnů od početí uplynulo. Po aplikaci vzorku elektronika prostředku změří, interpretuje a zobrazí konečný výsledek. Má přesnost vyšší než 99 % při zjišťování těhotenství ode dne očekávané menstruace.
7. **Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?** Před testováním si vždy přečtěte pokyny výrobce v příbalovém letáku ke všem lékům, které užíváte. Léky obsahující hCG a některé vzácné zdravotní stavy mohou být příčinou falešně pozitivních výsledků. Mimoděložní nebo nedávné těhotenství, i v případě nedonošení, mohou způsobit zavádějící výsledky. Pokud jste v menopauze nebo se jí blížíte, můžete obdržet falešně pozitivní výsledek, ačkoli těhotná nejste. Test by **NEMĚL** být ovlivněn hormonální léčbou obsahující klomifen citrát, běžnými léky proti bolesti, alkoholem, antibiotiky ani antikoncepčními pilulkami. Pokud jsou výsledky testu neočekávané, měla byste je probrat se svým lékařem. Vícečetná a mimoděložní těhotenství mohou vést k zavádějícím výsledkům ukazatele týdnů.
8. **Může výsledek ovlivnit něco jiného?** Pokud testujete více než 6 týdnů od početí, může ukazatel týdnů poskytnout neočekávané výsledky, protože hladina hCG v moči je příliš vysoká na to, aby test poskytl přesný odhad doby od početí.
9. **Výsledek předchozího testu byl „Jste těhotná", ale když jsem test zopakovala, byl výsledek negativní nebo jsem začala menstruovat. Co to znamená?** Je možné mít pozitivní výsledek a později zjistit, že už nejste těhotná. Tomu se říká „časná těhotenská ztráta", která není neobvyklá a postihuje přibližně 1 ze 4 těhotenství. Většině žen může mít později zdravé těhotenství.
10. **Znovu jsem se testovala a výsledek na ukazateli týdnů se snížil. Co to znamená?** Hladina hCG může při stoupání kolísat, a je tedy možné, že ukazatel týdnů bude při testování v po sobě jdoucích dnech ukazovat neočekávané výsledky. Před dalším testováním byste měla počkat nejméně 5 dní a použít první ranní moč. Pokud od posledního testu uplynulo více než 5 dní a výsledek na ukazateli týdnů se snížil, navštivte svého lékaře.

Likvidace testu
Před likvidací testovací tyčinky z ní vyjměte baterii. Baterii zlikvidujte podle příslušných pokynů pro likvidaci. Chcete-li baterii vyjmout, do otvoru na konci vložte minci a otočením otevřete zadní část testovací tyčinky. Není-li baterie vidět, pomozte si při jejím vyjímání vysunutím držáku baterie ve směru šipky.
Upozornění: Baterie nerozebírejte, znovu nenabíjejte ani je nevhazujte do ohně. Zlikvidujte zbytek tyčinky podle příslušného recyklačního postupu pro elektrická zařízení. Nevhazujte elektrická zařízení do ohně.

! Chyby testu

Symbol knížky



Během testování došlo k chybě. Důvodem může být:
- absorpční tyčinka nesměřovala dolů
- test nabyl po aplikaci moči položen rovně
- na tyčinku bylo aplikováno příliš mnoho nebo příliš málo moči

Proveďte testování znovu s novým testem a pečlivě dodržujte pokyny.

Prázdný displej



Test nefungoval podle očekávání, je třeba provést další test. Proveďte testování znovu s novým testem a pečlivě dodržujte pokyny.

www.clearblue.com

Funkční charakteristiky
Klinická funkce:
Testování klinické funkce prokázalo, že při zjišťování těhotenského stavu ode dne očekávané menstruace má prostředek >99% přesnost.
- 5652 klinických vzorků (2727 netěhotných vzorků a 2925 těhotných vzorků) testovaných ve dvou studiích prokázalo >99% shodu mezi stavem těhotenství a výsledky těhotenského testu.
- Bylo testováno 3076 klinických vzorků odebraných 131 dobrovolnicím, které prokázaly, že výsledek „ukazatele týdnů" má přesnost 93 % ve srovnání s určením data pomocí ultrazvuku a prudkého zvýšení hladiny LH.
- 93% přesnost vychází z nejnižší shody získané pro pásmo 2–3 týdnů. Celková shoda (tj. při zohlednění průměrné shody ve všech pásmech ukazatele týdnů 1–2, 2–3 a 3+) byla vypočtena jako 97 %.

Analytická funkce:
Analytická specifičnost byla stanovena testováním prostředku pomocí potenciálně interferujících nebo křížově reagujících látek. Výsledky potvrdily, že jejich vysoké koncentrace neovlivňují výkon prostředku. Výkon není ovlivňován ani vysokými hladinami fragmentované beta podjednotky hCG, velmi vysokými hladinami intaktního hCG, rozsahem specifických hmotností nebo pH moči. Studie přesnosti prokázala, že analytická citlivost prostředku je 25 mIU/ml.

Toto digitální zařízení pro diagnostické použití in vitro (IVD) splňuje požadavky na emise a odolnost podle normy EN 61326-2-6. Protiopatření týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) použitá v tomto elektronickém přístroji poskytnou přiměřenou ochranu proti účinkům elektromagnetického rušení, které se pravděpodobně vyskytuje v domácím prostředí. Následující preventivní varování platí pro zařízení vyhovující normě EN 61326-2-6.

a) Použití tohoto přístroje v suchém prostředí, zejména pokud jsou přítomny syntetické materiály (syntetické oděvy, koberce apod.), může vyvolávat škodlivé statické výboje, jež mohou způsobit nesprávné výsledky.

b) Nepoužívejte tento přístroj v těsné blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření (např. mobilních telefonů), protože by to mohlo narušit správnou funkci.

Literatura

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Groth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

*80 % výsledků Jste těhotná může být zjištěno 5 dní před vynechanou menstruací (4 dny před očekávanou menstruací).

EU REP	Autorizovaný zástupce v Evropské unii		Výrobce
IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek k použití in vitro		Nepoužívejte opakovaně
	Teplotní omezení 2 °C – 30 °C		Použít do data
	Nelikvidujte s domovním odpadem	LOT	Kód šarže

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko.

Máte-li dotazy týkající se výrobku, kontaktujte zákaznickou podporu na níže uvedené adrese:
Fidia Pharma CZ s.r.o., V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4, Česká republika.

Clearblue je ochranná známka společnosti SPD.
© 2026 SPD. Všechna práva vyhrazena.

2300772.00 04-2026

CE 0123